

RWM Dock Zubehör



Kurbelrad

Bestell-Nummer:
RWM-51092



Verstärkte Handgriffe

Bestell-Nummer (Paar):
RWM-51052



Halterung LCSU4

Bestell-Nummer:
RWM-51001



Netzteilhalterungen

Monnal T60: **RWM-51057**
LCSU4: **RWM-51087**
Oxylog 3000, groß: **RWM-51058**
Oxylog 3000, klein: **RWM-51032**



Sicherungsbügel Oxylog 3000

Bestell-Nummer:
RWM-51031



Halterung SERVO-air


Bestell-Nummer:
RWM-51028

Weitere Geräte-Halterungen auf Anfrage.



RWM Dock


Das RWM Dock mit integriertem Kippschutz ist so konzipiert, dass es sich über einen Adapter an jedem beliebigen Krankenbett für einen innerklinischen Transport fixieren lässt.

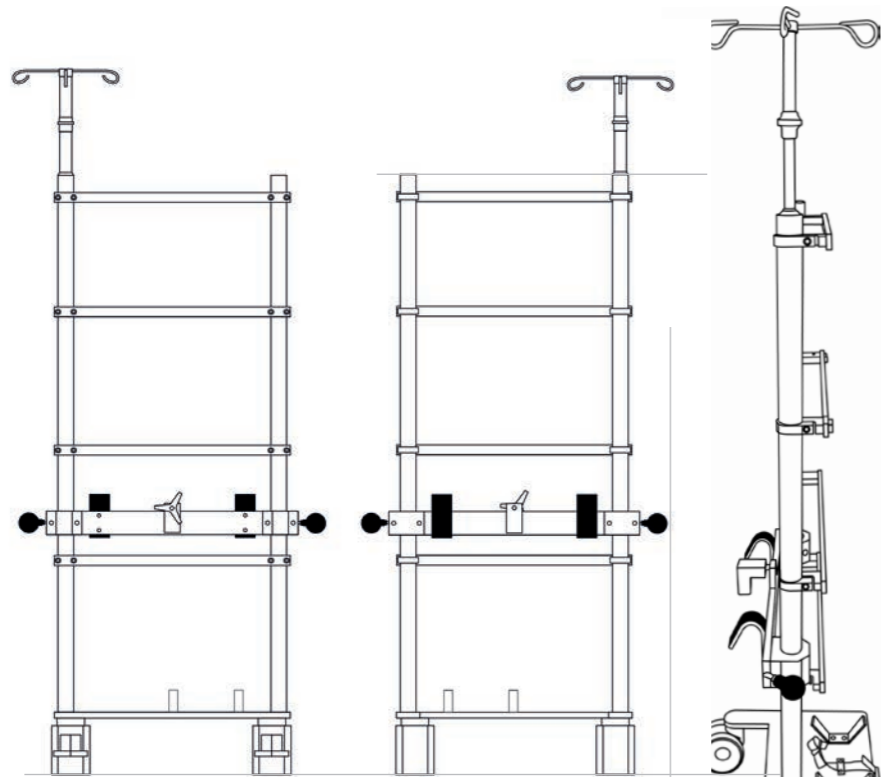

Das RWM Dock Basic (Grundplatte: 410 x 600 mm) bietet Platz für alle benötigten Gerätschaften, die für einen eventuellen Transport von Intensivpatienten benötigt werden.

Das RWM Dock Basic kann auch auf Transportliegen, OP-Tischen, sowie Inkubatoren fixiert werden.

Dies funktioniert ebenfalls über einen Adapter. Zusätzlich verfügt das RWM Dock Basic über eine Flaschenhalterung, auf der (je nach angebrachtem Gesamtgewicht der Gerätschaften) bis zu 10l-Flaschen Platz finden.

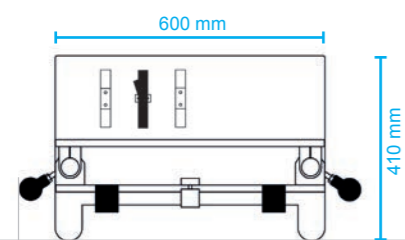

Das RWM Dock Basic XL ist vom Aufbau her wie das RWM Dock Basic, allerdings mit einer größeren Grundplatte (550mm x 950mm). Dies ermöglicht eine höhere Stabilität im Fall, dass größere Gerätschaften angebracht werden müssen (z.B. Maquet SERVO-air).

Eine zusätzliche Ausnehmung ermöglicht trotz der größeren Grundplatte nahe an das Patientenbett zu kommen. Das RWM Dock XL verfügt ebenfalls über einen integrierten Kippschutz mit Kurbel.

