




**Perfektion, wenn es
darauf ankommt.**
Dr. Mach Zubehör

Vertrieb durch:

RM
GmbH.

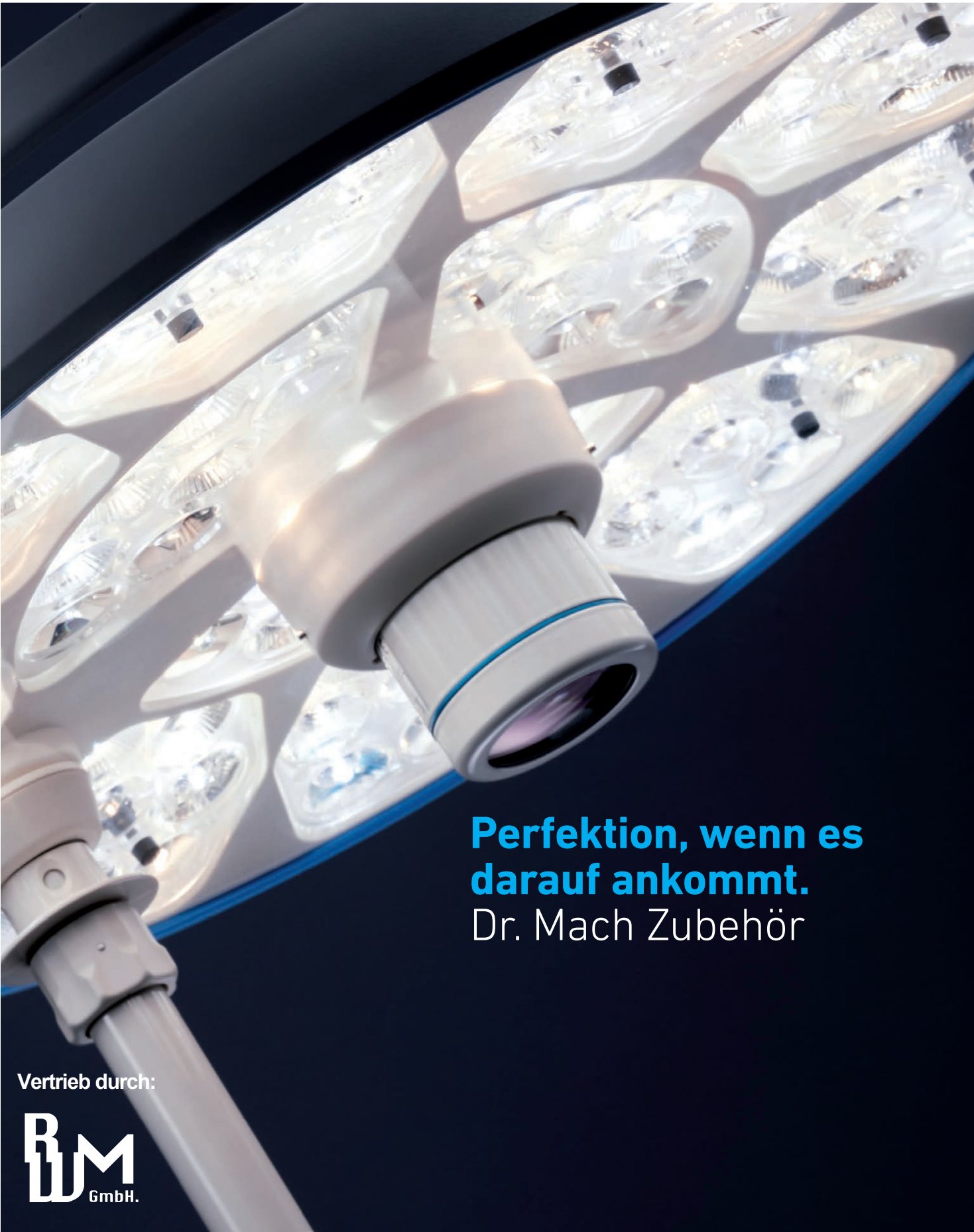

**Mach OP-Videosystem:
Höchste Bildqualität bei maximaler Bewegungsfreiheit
der Leuchte**

- Rotation der Arme ohne Begrenzung der Durchdrehbarkeit möglich
- Einfache Montage durch Übertragung von Videosignalen über Versorgungskabel oder kabellos über Funk
- Einfacher Einbau der Kamera in einem anderen OP
- Steuerung über kabellose Fernbedienung:
 - Ein- / Ausschalten
 - Fokus (automatisch / manuell)
 - Belichtung (automatisch / manuell)
 - Zoom
 - Bildrotation
 - Standbild
 - Weißabgleich

Varianten für Mach LED 6MC, LED 8MC und Kamerahalter:

- HD kabelgebunden**
HD-Bildqualität mit kabelgebundener Übertragung des Videosignals
- HD Funk**
HD-Bildqualität mit Funkübertragung des Videosignals
- 4K Funk**
4K-Bildqualität mit Funkübertragung des Videosignals

Technische Daten

Dr. Mach Kamera	HD kabelgebunden	HD Funk	4K Funk
Objektivsystem	30-fach optischer Zoom 12-fach Digital-Zoom f = 4.3 bis 129 mm F 1,6 – 4,7, Autofokus	30-fach optischer Zoom 12-fach Digital-Zoom f = 4.3 bis 129 mm F 1,6 – 4,7, Autofokus	20-fach optischer Zoom 12-fach Digital-Zoom f = 4.8 bis 96 mm F 2,0 – 3,8, Autofokus
Videoauflösung	1080i / 50, 1080i / 60	1080p / 50, 1080p / 60	2160p / 25, 2160p / 30
Videoausgang	HD-SDI	HDMI	HDMI
Bildpunkte	2.130.000 Pixel	2.130.000 Pixel	8.510.000 Pixel
Abmessungen (Ø, Länge)	80 x 150 mm	80 x 190 mm	80 x 190 mm
Gewicht	650 g	900 g	950 g



**Mach OP-Videosystem:
höchste Bildqualität bei maximaler Bewegungsfreiheit
der Leuchte**

- Rotation der Arme ohne Begrenzung der Durchdrehbarkeit möglich
- Einfache Montage durch Übertragung von Videosignalen kabellos über Funk
- Steuerung über kabellose Fernbedienung:
- Ein- / Ausschalten
- Fokus (automatisch / manuell)
- Belichtung (automatisch / manuell)
- Zoom
- Bilddrehung um 180°
- Standbild
- Weißabgleich

Variante für Mach LED 300DF SC und LED 300MC:

- HD Funkkamera LED 300**
- HD-Bildqualität mit kabelloser Übertragung des Videosignals

Technische Daten

Dr. Mach Kamera	HD Funkkamera LED 300
Objektivsystem	10-fach optischer Zoom
	16-fach Digital-Zoom
	f = 3,3 bis 33,0 mm
	F 1,8 – 3,4, Autofokus
Videoauflösung	1080i / 50, 1080i / 60
Videoausgang	HDMI
Bildpunkte	2.140.000 Pixel

Weitere Informationen zu den Videosystemen


1



2



3

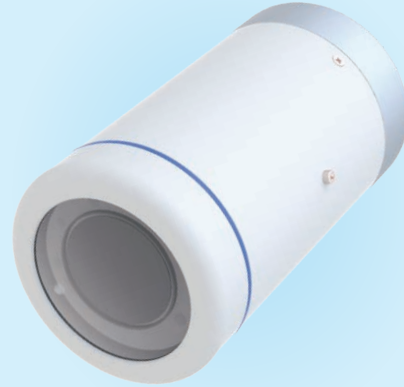

1 Kamerahalter

für alle Dr. Mach Kameras als Decken- und Wandmodell und als Kombinationsaufhängung (außer HD Funkkamera LED 300)

2 Kamerafernbedienung

zur Bedienung der Kamera

3 Kamera

kann aus der Leuchte herausgenommen und in eine andere Leuchte mit Kamera-vorbereitung eingesetzt werden (nur bei Mach LED 6MC und Mach LED 8MC)

4 Funkempfänger

inklusive Wandhalterung zur Befestigung des Funkempfängers bei allen Funk-Videosystemen




5 Kameraabdeckung

Hygienischer Abschluss bei Kamravorbereitung oder wenn Kamera nicht eingesetzt ist (nur bei Mach LED 6MC und Mach LED 8MC)

4



5

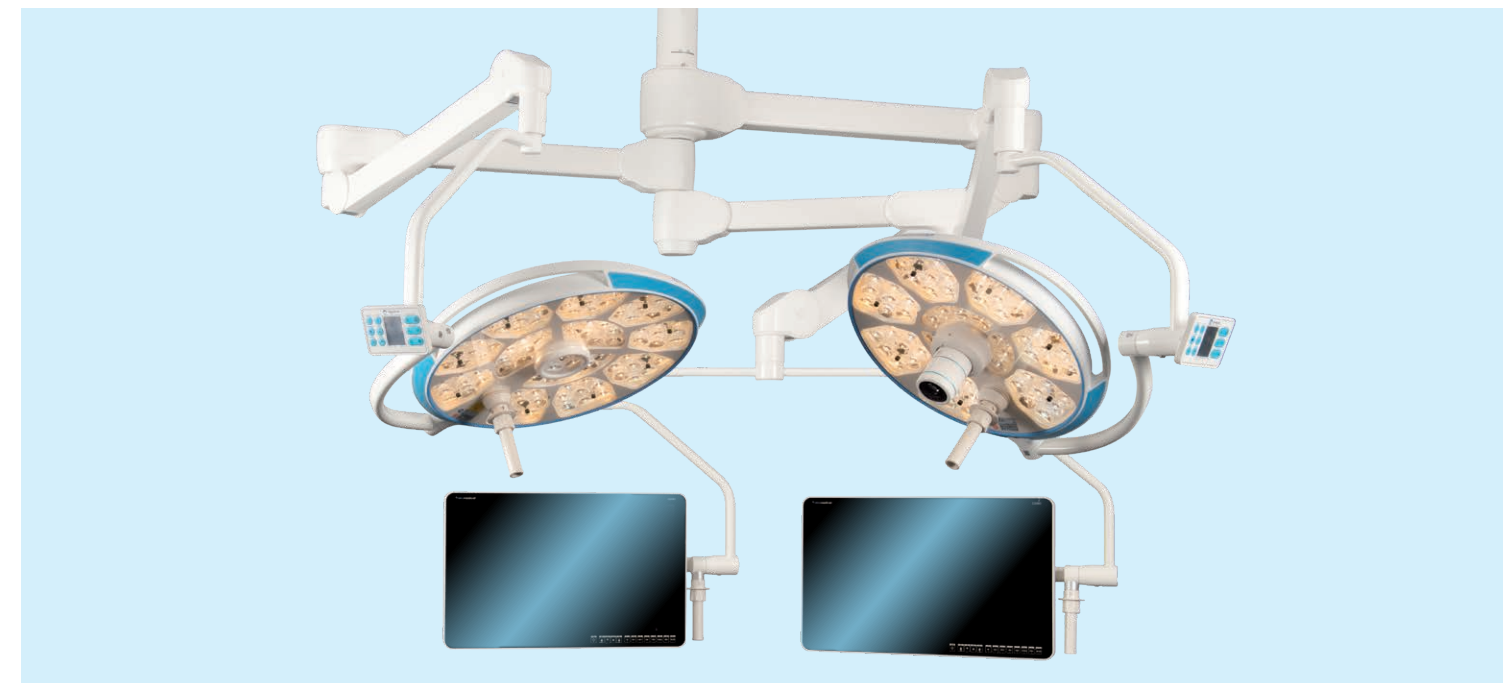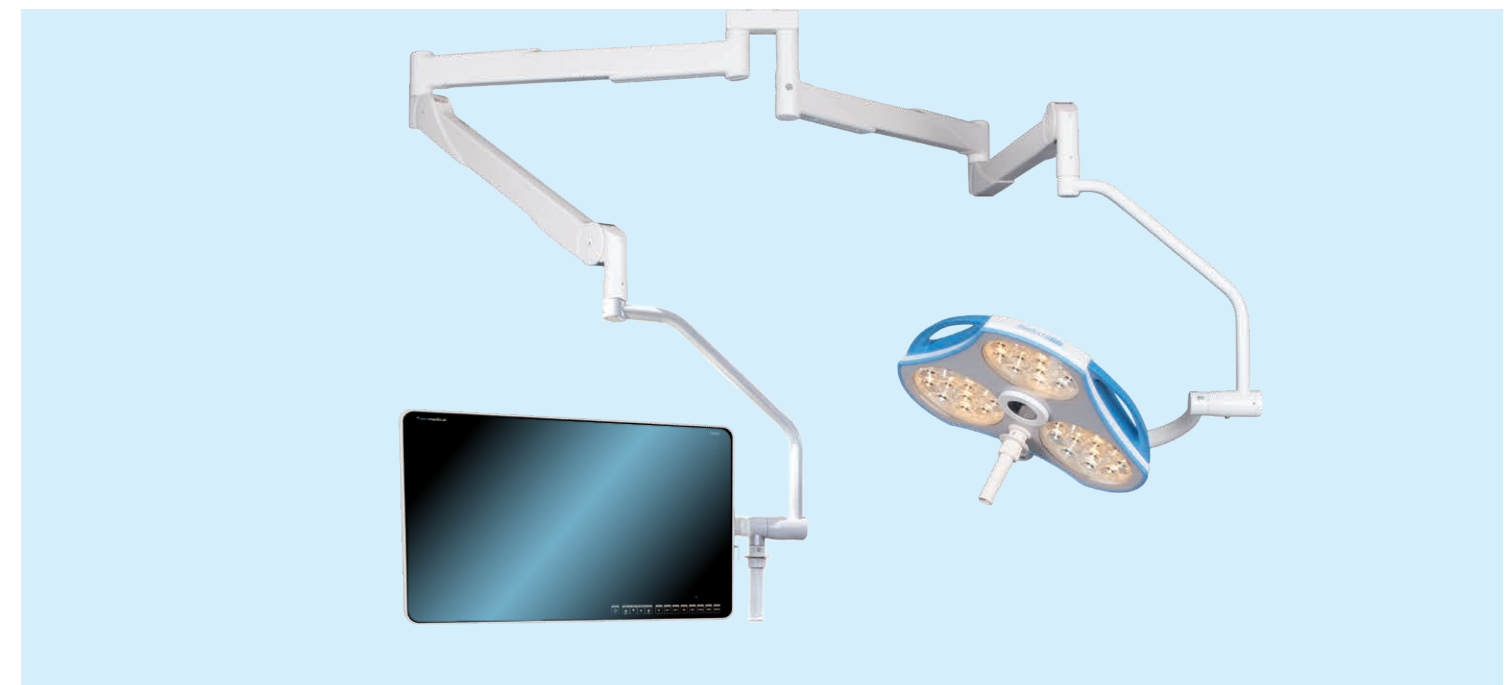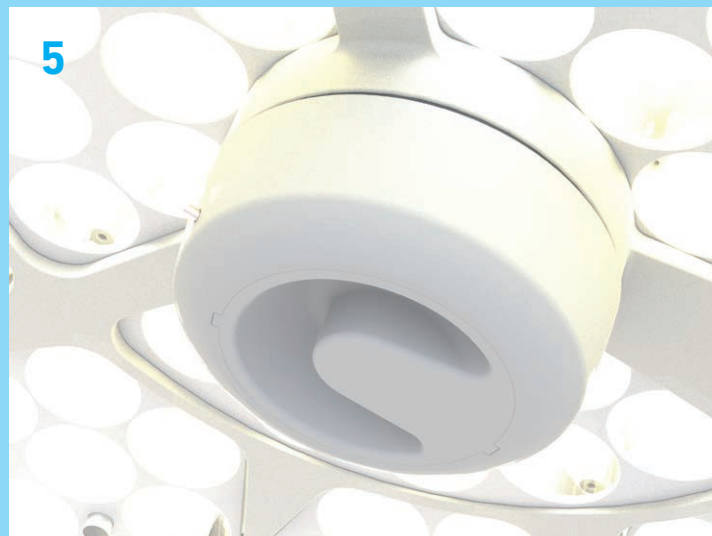

Lieferumfang der Kamerasysteme:

HD kabelgebunden

Kamera, drahtlose Kamerafernbedienung, Videobox mit 1x HD-SDI Ausgangssignal und 7 Meter Verbindungskabel zu einem Monitor (BNC)

HD Funk

Kamera, Wandbefestigung für Funkempfänger, drahtlose Kamerafernbedienung, Funkempfänger mit 1x HDMI Ausgangssignal und 10 Meter Verbindungskabel zu einem Monitor (HDMI)

4K Funk

Kamera, Wandbefestigung für Funkempfänger, drahtlose Kamerafernbedienung, Funkempfänger mit 1x HDMI Ausgangssignal und 10 Meter Verbindungskabel zu einem Monitor (HDMI)

HD Funkkamera (LED 300)

Kamera, drahtlose Kamerafernbedienung, Funkempfänger mit 1 x HDMI Ausgangssignal und 10 Meter Verbindungskabel zu einem Monitor (HDMI)

Einzel-Monitorträger




Optionen

- Wand-/ Deckenmodell
- Für Monitore 19' bis 32'
- Auslieferung ohne Monitor
- Stromanschlusskabel inkl.

Technische Daten

Dr. Mach Monitorträger	Wand	Decke
Max. Gewicht Monitore	10 kg	10 kg
Standard TFT-Monitoraufhängung	19 Zoll	19 Zoll

Tandem-Monitorträger

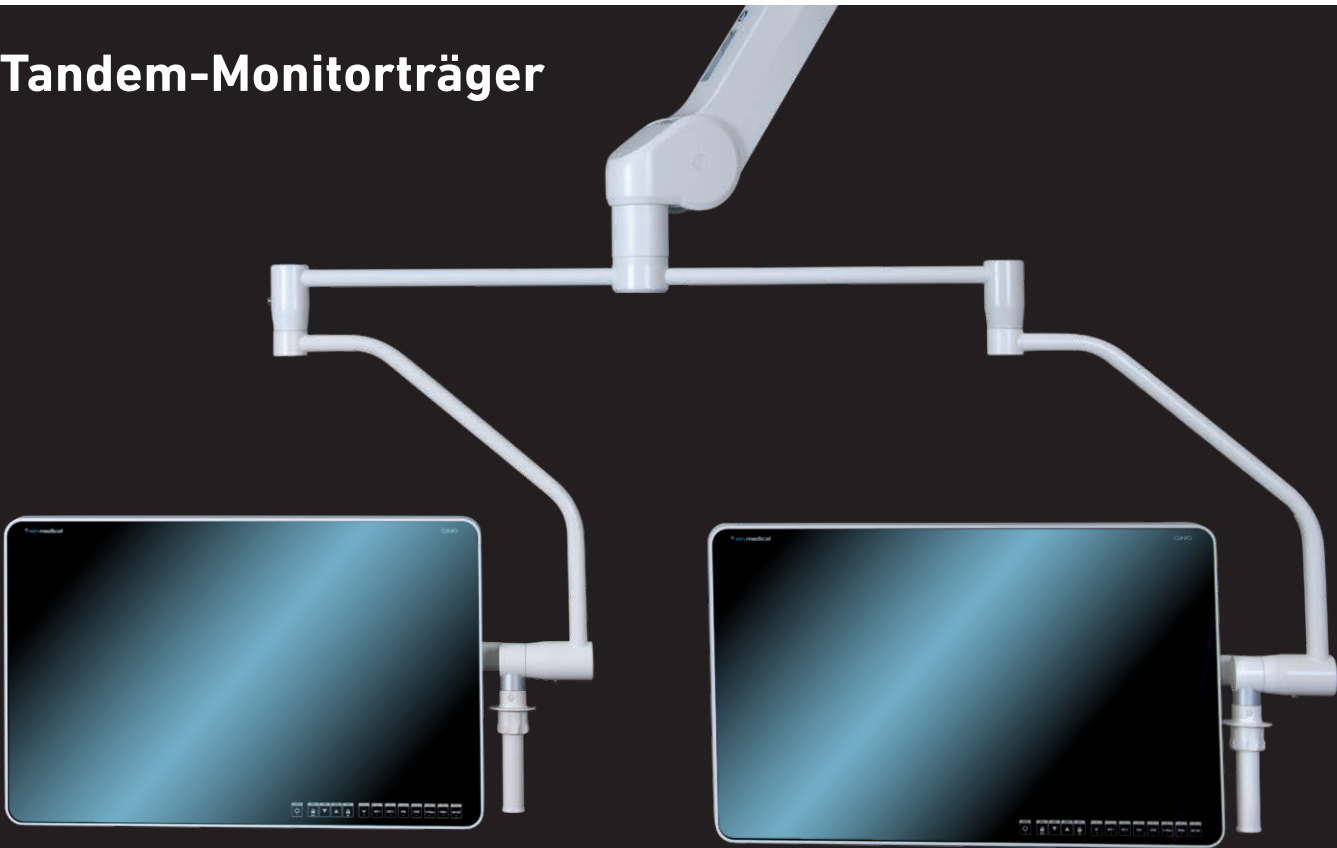

Optionen

- Deckenmodell
- Für Monitore 19' bis max. 27'
- Auslieferung ohne Monitor
- Stromanschlusskabel inkl.

Technische Daten

Dr. Mach Monitorträger	Decke
Max. Gewicht Monitore	2 x 11 kg
Standard TFT-Monitoraufhängung	2 x 19 Zoll

Ablagetisch



Optionen

- Wand-/ Deckenmodell
- Optional mit 1, 2 und 4 Steckdosen lieferbar
- Mit AV, ZV und ZSV Steckdosen
- Standardgemäß ohne Elektrik
- Mit Potentialausgleichsdose lieferbar
- Mit Schaumgummiauflage verfügbar
- Aufhängung hat begrenzte Durchdrehbarkeit

Technische Daten

Dr. Mach Ablagetisch	Wand
Abmessungen	48 x 38 cm
Eigengewicht	4 kg
Max. Belastung	14 kg

Flanschlösungen


1 3-fach Flansch
Möglichkeit einer Flanschplatte mit drei Ausgängen zum Beispiel für seitliche Monitore.

2 Zwischenflansch
Bei Zwischendecken mit einem Abstand ab 40 cm zur Massivdecke wird ein Zwischenflansch verwendet.

1



2

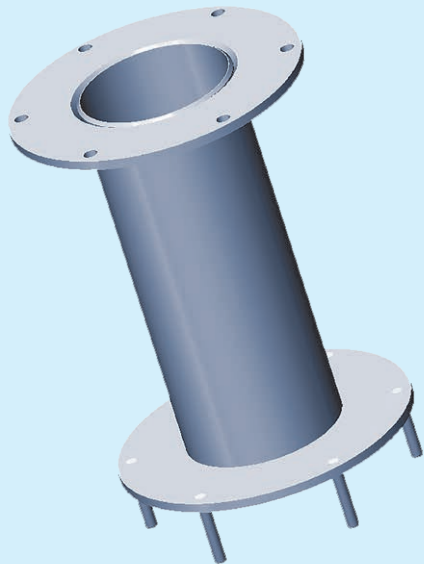



Dr. Mach GmbH & Co. KG | Tel +49 (0)8092 20930 | www.dr-mach.de



Vertrieb durch:
RWM Medizintechnik
www.rwm.or.at